

RESTAURATION & PROTHÈSES



Create it 

RESTAURATION & PROTHÈSES

NSK

SOMMAIRE

Turbines

Technologie et Fonctionnalité	03 - 04
Ti-Max Z	05 - 07
S-Max M	08
S-Max pico	09
Ti-Max X450	10
Pana-Max PLUS	11
Pana-Max2	12
Raccords	13 - 14

Contre-angles

Technologie et Fonctionnalité	15 - 16
Ti-Max Z	17 - 20
Ti-Max Z45L	21
Ti-Max nano	22
Ti-Max X	23 - 24
S-Max M	25
Série FX	26
Série EX / isoE-LUX	27 - 28

Micromoteurs

NLX nano / NBX / M40 XS	29
Moteurs Pneumatiques	30

Détartreurs

Varios 970 / Ti-Max S970	31 - 32
--------------------------------	---------

Pièces Détachées	33 - 34
-------------------------------	----------------

TECHNOLOGIE et FONCTIONNALITÉ

Griffe Bouton-poussoir

La Griffe bouton-poussoir est le modèle de mécanisme d'auto-serrage original de NSK, qui assure une excellente rétention de la fraise lors de la rotation. Elle permet d'introduire et de retirer aisément la fraise, sans utiliser d'outils. Le mécanisme de serrage a été conçu de telle sorte que la force de rétention de la fraise augmente lorsque la pression sur celle-ci augmente.

Roulements en Céramique

Les roulements en céramique sont 25% plus résistants que les roulements ordinaires en acier et sont deux fois plus légers. Ces roulements ont l'avantage de voir leur usure de frottement considérablement réduite, augmentant ainsi les performances et la longévité des instruments.

Stérilisation en Autoclave



Tous les instruments NSK peuvent être fréquemment stérilisés en autoclave jusqu'à 135°C, sans que cela ne nuise à leur durée de vie ni à leur performance.

La Thermodésinfection



La désinfection des instruments rotatifs avant stérilisation est une pratique recommandée pour un contrôle plus efficace du risque infectieux. Ce symbole signifie que vous pouvez nettoyer et désinfecter l'instrument en utilisant un thermodésinfecteur.

DURAGRIP

Le revêtement anti-dérapant, dernière technologie de surface de NSK, est un revêtement résistant aux abrasions et aux rayures, protégeant ainsi l'instrument plus durablement et permettant une meilleure préhension.

DURACOAT

DURACOAT, technologie de surface de NSK, profite des propriétés non allergéniques et biocompatibles du titane. DURACOAT crée une surface lisse, inrayable et confortable.

Microfiltre

Un microfiltre de diamètre 0,3 mm maintient les contaminants hors du système de pulvérisation d'eau, ce qui réduit considérablement les blocages et facilite le nettoyage.

Barreau de Quartz

Le barreau de quartz NSK offre une excellente luminosité, possède une longue durée de vie et reste intact même après de nombreux passages en autoclave.

Système Clean Head

Le système Clean Head est un mécanisme conçu pour empêcher la remontée de fluides et autres organismes infectieux dans la tête de l'instrument, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements à bille et des pièces mécaniques.

Quadruple Spray

Le quadruple Spray de NSK refroidit la totalité de la fraise évitant tout risque d'échauffement.

Valve anti-retour

Ce mécanisme permet d'éviter la remontée des fluides contaminés dans les lignes d'eau de l'instrument.



Ti-Max Z Turbines

La puissance est
entre vos mains.



Rotor tridimensionnel


Capacité optimisée pour capturer une plus grande quantité d'air et délivrer une puissance jusqu'à 26 watts.



Roulements en céramique

Ces roulements permettent une rotation à haute vitesse, une excellente stabilité et durent deux fois plus longtemps que leurs homologues existants.

Ti-Max Z

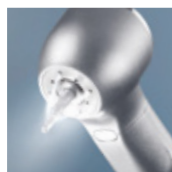

Corps en titane avec revêtement DURAGRIP
Roulements en Céramique
Griffe Bouton-poussoir
Quadruple Spray
Système Clean Head
Barreau de Quartz
Microfiltre (Z800/Z900)
3X-Power System (Z micro)
Quick Stop (Z micro)
Changement de la cartouche simplifié (Z micro)



Tête Micro

- Puissance : 20 W
- Vitesse : 380 000-450 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø9,0 x H 10,8 mm
- Double usage pour fraise standard / fraise courte


Tête Mini

- Puissance : 23 W
- Vitesse : 360 000-440 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø10,8 x H 12,1 mm

Tête Standard

- Puissance : 26 W
- Vitesse : 320 000-400 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø12,5 x H 13,1 mm

S-Max M

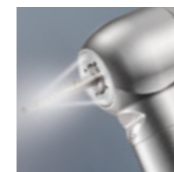

Corps en Acier Inoxydable
Roulements en Céramique
Griffe Bouton-poussoir
Quadruple Spray
Système Clean Head
Barreau de Quartz
3X-Power System
Changement de la cartouche simplifié



Tête Mini

- Puissance : 23 W
- Vitesse : 380 000-450 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø10,6 x H 12,4 mm

Tête Standard

- Puissance : 26 W
- Vitesse : 325 000-430 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø12,1 x H 13,3 mm

Raccord NSK

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Micro	●	Z micro	PA2357
Mini	●	Z800L	P1110
Standard	●	Z900L	P1111

Raccord KaVo®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Micro	●	Z micro KL	PA2358
Mini	●	Z800KL	P1112
Standard	●	Z900KL	P1113

Raccord Dentsply Sirona®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Micro	●	Z micro SL	PA2359
Mini	●	Z800SL	P1114
Standard	●	Z900SL	P1115

Raccord W&H®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	Z800WL*	P1120
Standard	●	Z900WL*	P1121

*Turbinas equipadas d'una ampoule LED

Raccord Bien Air®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	Z800BL*	P1116
Standard	●	Z900BL*	P1117

*Turbinas equipadas d'una ampoule LED

Raccord NSK

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	M800L	P1253
Mini	—	M800	P1255
Standard	●	M900L	P1254
Standard	—	M900	P1256

Raccord KaVo®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	M800KL	P1257
Standard	●	M900KL	P1258
Standard	—	M900K	P1259

Raccord Dentsply Sirona®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	M800SL	P1261
Standard	●	M900SL	P1262

Raccord W&H®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	M800WL*	P1265
Standard	●	M900WL*	P1266
Standard	—	M900W	P1287

*Turbinas equipadas d'una ampoule LED

Raccord Bien Air®

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	●	M800BL*	P1263
Standard	●	M900BL*	P1264

*Turbinas equipadas d'una ampoule LED

S-Max pico



Corps en Acier Inoxydable
Roulements en Céramique
Griffe Bouton-poussoir
Simple Spray
Système Clean Head
Barreau de Quartz



- Puissance : 9 W
- Vitesse : 380 000-450 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø8,6 x H 9,0 mm
- Pour fraises courtes / fraises ultra courtes

Raccord NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	S-Max pico	P1140

Raccord KaVo®


Lumière	MODÈLE	RÉF
●	S-Max pico KL	P1142

Raccord Dentsply Sirona®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	S-Max pico SL	P1143

pico bur

MODÈLE	RÉF
PC1 • Vendues par 3	Y1001817
PC2 • Vendues par 3	Y1001818
PC3 • Vendues par 3	Y1001819
PC3ff • Tête extra-fine • Vendues par 3	Y1002019
PC4 • Vendues par 3	Y1001820

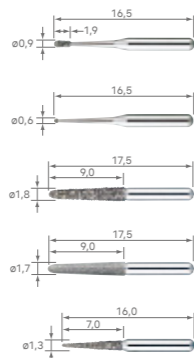

Raccord W&H®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	S-Max pico WLED*	P1145


*Turbines équipées d'une ampoule LED

Raccord Bien Air®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	S-Max pico BLED*	P1144

*Turbines équipées d'une ampoule LED

MODÈLE	RÉF
PC4ff • Tête extra-fine • Vendues par 3	Y1002020
PC5 • Vendues par 3	Y1001821
PC5ff • Tête extra-fine • Vendues par 3	Y1002021
PC6 • Vendues par 3	Y1001822
PC6ff • Tête extra-fine • Vendues par 3	Y1002022

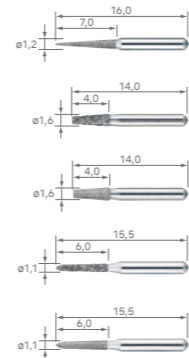

Ti-Max X450



Corps en titane avec revêtement DURACOAT
Roulements en Céramique
Griffe Bouton-poussoir
Triple Jet
Système Clean Head
Barreau de Quartz



- Puissance : 21 W
- Vitesse : 380 000-450 000 min⁻¹
- Taille de la Tête : ø11,2 x H 13,5 mm
- Tête angulée à 45°
- Pour fraise de 25 mm uniquement

Raccord NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X450L	P1078

Raccord KaVo®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X450KL	P1079

Raccord Dentsply Sirona®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X450SL	P1080

Raccord W&H®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X450WLED*	P1082

*Turbines équipées d'une ampoule LED

Raccord Bien Air®

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X450BLED*	P1081

*Turbines équipées d'une ampoule LED

Pana-Max PLUS



Corps en Acier Inoxydable
Roulements en Céramique
Griffe Bouton-poussoir
Quadruple Spray
Système Clean Head
Valve anti-retour
Valve de régulation de pression d'air



Tête Mini
• Vitesse : 380 000-450 000 min⁻¹
• Taille de la Tête : ø10,6 x H 12,4 mm



Tête Standard
• Vitesse : 340 000-410 000 min⁻¹
• Taille de la Tête : ø12,1 x H 13,3 mm

Midwest 4 voies (Connexion à Visser au Cordon)

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	—	PAP-MU M4	P1021
Standard	—	PAP-SU M4	P1022

Borden 2 voies (Connexion à Visser au Cordon)

Tête	Lumière	MODÈLE	RÉF
Mini	—	PAP-MU B2	P1023
Standard	—	PAP-SU B2	P1024

Pana-Max2



Corps en Acier Inoxydable
Roulements en Céramique
Griffe Bouton-poussoir
Simple Spray
Système Clean Head
Valve anti-retour (M4/B2)
Valve de régulation de pression d'air (M4/B2)



• Vitesse : 350 000-450 000 min⁻¹
• Taille de la Tête : ø11,2 x H 13,4 mm



• Vitesse : 350 000-450 000 min⁻¹
• Taille de la Tête : ø11,2 x H 13,4 mm

Raccord NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	Pana-Max2 PTL	P1211

Raccord KaVo®

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	Pana-Max2 KV	P1212

Midwest 4 voies (Connexion à Visser au Cordon)

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	Pana-Max2 M4	P1154

Borden 2 voies (Connexion à Visser au Cordon)

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	Pana-Max2 B2	P1155

Raccords LED



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	PTL-CL-LED	P1001600

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour NSK • LED incorporée dans le raccord



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	PTL-CL-LED III	P1001601

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour NSK, avec réglage du débit d'eau
- LED incorporée dans le raccord



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	KCL-LED	P1005600

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour KaVo® MULTiflex® Raccord LUX, avec réglage du débit d'eau
- LED incorporée dans le raccord



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	SCL-LED	P1009600

- Corps en Acier Inoxydable • Revêtement en titane • Valve anti-retour
- Pour Sirona® avec réglage du débit d'eau
- LED incorporée dans le raccord

Raccords Non Lumière



Lumière	MODÈLE	RÉF
—	FM-CL-M4	P434051

- Corps en Acier Inoxydable • Valve anti-retour • Pour NSK



Lumière	MODÈLE	RÉF
—	FM-CL-B2/3	P432051

- Corps en Acier Inoxydable • Valve anti-retour • Pour NSK

Tableau de montage par série

	NSK (Lumière)	NSK (Non lumière)	KaVo® (Lumière)	KaVo® (Non lumière)	Dentsply Sirona®	W&H® (Lumière)	W&H® (Non lumière)	Bien Air®
Ti-Max Z	○	—	○	—	○	○ (Z800WL / Z900WL)	—	○ (Z800BL / Z900BL)
S-Max M	○	○	○	○ (M900K)	○	○	○ (M900W)	○
S-Max pico	○	—	○	—	○	○	—	○
Ti-Max X450	○	—	○	—	○	○	—	○
Pana-Max2	—	○	—	○	—	—	—	—
Type de Raccord	 Raccord NSK (Type PTL)		 KaVo® Multiflex®		 Raccord Sirona®	 W&H® Roto Quick®	 Bien Air® UNIFIX®	


Ti-Max Z45L



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Multiplicateur 1:4,2	●	Z45L	C1064

- Vitesse Max : 168 000 min⁻¹ • Pour fraises FG (ø1,6) • Tête à 45°
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP • Griffes Bouton-poussoir
- Quadruple Spray (avec 2 types de sprays) • Roulements en Céramique
- Microfiltre • Système Anti-chauffe • Système Clean Head
- Barreau de Quartz

Une Meilleure Accessibilité

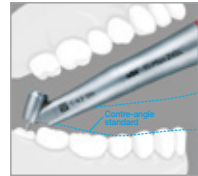

La tête orientée à 45° permet d'accéder facilement au secteur molaire en réduisant les interférences avec les dents proximales.

La Fonction Double Spray



Spray par jet

Spray par brumisation

La première fonction double spray du marché permet de choisir entre le brumisateur et le jet selon les conditions et le traitement. Le jet d'eau évite l'enphysème sous cutané dû aux interventions chirurgicales tandis que le brumisateur refroidit de manière efficace la fraise lors de l'intervention.

Une grande variété d'applications cliniques grâce à une meilleure accessibilité

Section d'une troisième molaire mandibulaire gauche incluse



Grâce à l'angulation à 45° de la tête et l'étréitesse du corps, l'accès à la zone de traitement est facilité et l'espace disponible plus important. Il est donc plus simple d'utiliser la fraise dans le bon angle de coupe, même si la section est proche de l'apex de la dent en mésial.

Traitement d'une carie au collet d'une incisive latérale maxillaire gauche



Un appui solide sur la dent antérieure permet un fraisage stable sans interférence avec les dents antagonistes. En contrôlant l'axe de la fraise, on peut aussi minimiser les interventions.

Traitement d'une carie de la deuxième prémolaire maxillaire gauche en palatin



Le contre-angle Ti-Max Z45L permet de disposer d'un espace de travail suffisant entre les dents maxillaires adjacentes lors du traitement d'une deuxième prémolaire face palatine.

Traitement canalair d'une deuxième prémolaire mandibulaire droite



Le Ti-Max Z45L permet une préparation du canal radiculaire correcte, sans interférence avec le clamp d'une digue. Cette flexibilité permet donc des traitements plus précis et plus sûrs.

Ti-Max nano



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Multiplicateur 1:5	●	nano95LS	C1099

- Vitesse Max : 200 000 min⁻¹ • Pour fraises FG (ø1,6)
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP • Griffes Bouton-poussoir
- Quadruple Spray • Roulements en Céramique • Microfiltre
- Système Anti-chauffe • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
--------------------	---------	--------	-----

Rapport Direct 1:1	●	nano25LS	C1100
--------------------	---	----------	-------

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP • Griffes Bouton-poussoir
- Simple Spray • Microfiltre • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
--------------------	---------	--------	-----

Réducteur 4:1	●	nano15LS	C1101
---------------	---	----------	-------

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP • Griffes Bouton-poussoir
- Simple Spray • Microfiltre • Système Clean Head • Barreau de Quartz

Pièce à main Droite

Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
--------------------	---------	--------	-----

Rapport Direct 1:1	●	nano65LS	H1048
--------------------	---	----------	-------

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises PM / CA (ø2,35)*
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP • Simple Spray
- Système Clean Head • Barreau de Quartz

*Pour fraise CA, système d'arrêt de fraise fourni



Ti-Max X



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Multiplicateur 1:5	●	X95L	C600
Multiplicateur 1:5	—	X95	C610

- Vitesse Max : 200 000 min⁻¹ • Pour fraises FG (ø1,6)
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Griffes Bouton-poussoir
- Roulements en Céramique • Quadruple Spray • Microfiltre
- Système Anti-chauffe • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	●	X25L	C601
Rapport Direct 1:1	—	X25	C611

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Griffes Bouton-poussoir
- Simple Spray • Microfiltre • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Réducteur 4:1	●	X15L	C602
Réducteur 4:1	—	X15	C612

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Griffes Bouton-poussoir
- Simple Spray • Microfiltre • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Multiplicateur 1:5	—	X95EX	C1072

- Vitesse Max : 200 000 min⁻¹ • Pour fraises FG (ø1,6)
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Griffes Bouton-poussoir
- Roulements en Céramique • Quadruple Spray • Système Clean Head

Spray Externe



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Réducteur 10:1	●	X12L	C606
Réducteur 10:1	—	X12	C616

- Vitesse Max : 4 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Griffes Bouton-poussoir
- Simple Spray • Microfiltre • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Réducteur 10:1	●	X35L	C620
Réducteur 10:1	—	X35	C624

- Vitesse Max : 4 000 min⁻¹ • Pour lime manuelle & lime mécanique
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Balayage 60°
- Griffes Bouton-poussoir • Simple Spray • Microfiltre • Barreau de Quartz



MODÈLE	RÉF
Adaptateur QF	C877701



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Réducteur 16:1	●	X57L	C609
Réducteur 16:1	—	X57	C619

- Vitesse Max : 2 500 min⁻¹ • Pour brochettes et cupules à vis
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Rotation 360°
- Avec mécanisme pour l'étanchéité à la poussière
- Sans spray • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Réducteur 4:1	●	X55L	C608
Réducteur 4:1	—	X55	C618

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour inserts Eva / Profin / Limes orthodontiques (diamètre 2,36-2,40 mm)*
- Mouvement alternatif vertical 1,4 mm
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT • Simple Spray
- Microfiltre • Barreau de Quartz • Insert non inclus
- Avec mécanisme de blocage de l'insert
- *Tige métallique ne peut pas être utilisée.

Pièce à main Droite



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	●	X65L	H273
Rapport Direct 1:1	—	X65	H274

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises PM (ø2,35)
- Pour fraises CA (ø2,35)* • Corps en titane avec revêtement DURACOAT
- Simple Spray • Système Clean Head • Barreau de Quartz
- *Pour fraise CA, système d'arrêt de fraise fourni

S-Max M



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Multiplificateur 1:5	●	M95L	C1023
Multiplificateur 1:5	—	M95	C1026

- Vitesse Max : 200 000 min⁻¹ • Pour fraises FG (ø1,6)
- Corps en Acier Inoxydable • Griffe Bouton-poussoir
- Roulements en Céramique • Quadruple Spray • Système Clean Head
- Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	●	M25L	C1024
Rapport Direct 1:1	—	M25	C1027

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en Acier Inoxydable • Griffe Bouton-poussoir
- Simple Spray • Système Clean Head • Barreau de Quartz



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Réducteur 4:1	●	M15L	C1025
Réducteur 4:1	—	M15	C1028

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en Acier Inoxydable • Griffe Bouton-poussoir
- Simple Spray • Système Clean Head • Barreau de Quartz

Pièce à main Droite



Rapport de vitesse	Lumière	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	—	M65	H1008

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises PM (ø2,35)
- Pour fraises CA (ø2,35)* • Corps en Acier Inoxydable • Simple Spray
- Système Clean Head *Pour fraise CA, système d'arrêt de fraise fourni

Série FX



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	FX25m	C1052001

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en Acier Inoxydable • Roulements à billes
- Griffe Bouton-poussoir • Système Clean Head



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Réducteur 4:1	FX15m	C1053001

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour fraises CA (ø2,35)
- Corps en Acier Inoxydable • Roulements à billes
- Griffe Bouton-poussoir • Système Clean Head



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Réducteur 16:1	FX75m	C1055001

- Tête Mini • Vitesse Max : 2 300 min⁻¹ • Pour limes mécaniques
- Corps en Acier Inoxydable • Rotation 360°
- Griffe Bouton-poussoir



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Réducteur 4:1	FX57m	C1054001

- Vitesse Max : 5 000 min⁻¹ • Pour cupules et broches à visser (non fournies)
- Corps en Acier Inoxydable • Rotation 360°
- Paste Defense System • Sans spray



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	FX65m	H1014001

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises PM (ø2,35)
- Corps en Acier Inoxydable • Système Clean Head

Série EX

Têtes pour Application Générale Spray Externe

MODÈLE	RÉF
FPB-Y	C875

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹
- Pour fraises CA (ø2,35) • Système Clean Head
- Griffes Bouton-poussoir • Roulements à billes

MODÈLE	RÉF
NAC-Y	C032002

- Vitesse Max : 30 000 min⁻¹
- Pour fraises CA (ø2,35) • Type Baionnette

MODÈLE	RÉF
BB-Y	C037

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹
- Pour fraises CA (ø2,35) • Type Baionnette
- Roulements à billes

MODÈLE	RÉF
NBBW-Y	C211

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹
- Pour fraises CA (ø2,35) • Type Baionnette
- Roulements à billes • Avec spray latéral

MODÈLE	RÉF
NM-Y	C247

- Vitesse Max : 30 000 min⁻¹
- Pour fraises CA (ø2,35) • Tête Mini
- Type Baionnette

MODÈLE	RÉF
FFB-Y	C884

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹
- Pour fraises FG (ø1,6) • Système Clean Head
- Griffes Bouton-poussoir

MODÈLE	RÉF
NRS2-Y	C549

- Vitesse Max : 3 000 min⁻¹
- Pour fraises CA (ø2,35) • Système Clean Head
- Griffes Bouton-poussoir • Réducteur 10:1



Têtes pour Application Prophylaxie

MODÈLE	RÉF
AR-Y (S)	C187

- Vitesse Max : 5 000 min⁻¹
- Pour les cupules et brochettes à visser

MODÈLE	RÉF
AR-Y (K)	C188

- Vitesse Max : 5 000 min⁻¹
- Pour cupules à clipper

MODÈLE	RÉF
EVA-Y	C235

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour inserts Eva
- Mouvement va-et-vient vertical (Longueur de course 1,4 mm)

Têtes pour Application Endodontiques

MODÈLE	RÉF
MP-Y	C547

- Vitesse Max : 20 000 min⁻¹ • Tête Mini
- Griffes Bouton-poussoir

MODÈLE	RÉF
MPA-Y	C548

- Vitesse Max : 20 000 min⁻¹ • Tête Mini
- Connecteur pour localisateur d'Apex (Pour limes longues) • Griffes Bouton-poussoir

MODÈLE	RÉF
MPAS-Y	C882

- Vitesse Max : 20 000 min⁻¹ • Tête Mini
- Connecteur pour localisateur d'Apex (Pour limes courtes) • Griffes Bouton-poussoir

MODÈLE	RÉF
TEQ-Y	C849001

- Vitesse Max : 4 000 min⁻¹ • Balayage 80°
- Pour limes mécaniques (ø2,35)
- Griffes Bouton-poussoir

MODÈLE	RÉF
TEP-Y	C837001

- Vitesse Max : 4 000 min⁻¹ • Balayage 60°
- Pour limes manuelles • Griffes Bouton-poussoir



Corps

MODÈLE	RÉF
EC-30	C100008

MODÈLE	RÉF
EC-30M	C100007

- Rapport Direct 1:1

MODÈLE	RÉF
ER4	C634

MODÈLE	RÉF
ER4M	C634002

- Réducteur 4:1

MODÈLE	RÉF
ER10	C635

- Réducteur 10:1

MODÈLE	RÉF
ER16	C636

- Réducteur 16:1



Pièce à main Droites



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	EX-6B	H260001

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises PM (ø2,35)
- Système Clean Head



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Rapport Direct 1:1	EX-6D	H267001

- Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Pour fraises PM (ø2,35)
- Système Clean Head



Rapport de vitesse	MODÈLE	RÉF
Réducteur 4:1	EX-5B	H262

- Vitesse Max : 10 000 min⁻¹ • Pour fraises PM (ø2,35)
- Système Clean Head

MODÈLE	RÉF
Bague de Spray	H019711

- Pour EX-6B, EX-5B (en option)

isoE-LUX Sonde de Lumière



Lumière	MODÈLE	RÉF
●	isoE-LUX	Z1265

- Connexion du moteur optique Type E
- Corps en Acier Inoxydable • Fibre Optique en Verre

■ Les corps et les têtes sont vendus séparément. Vous pouvez combiner les corps et les têtes selon vos souhaits suivant et les indications cliniques.

Micromoteur Électrique

NLX nano Système Portable pour Micromoteur Électrique

Vitesse : 2 000 – 40 000 min⁻¹, Couple : 3,4 Ncm

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	NLX nano S230 (230 V)	Y1001362

Contenu

• Boîtier de contrôle • Moteur • Cordon • Adaptateur CA

Spécifications

[Boîtier de contrôle] [Micromoteur](sans cordon)
 • Alimentation : CA 28 V 50/60 Hz • Dimensions : ø22 x L 70 mm
 • Dimensions : L 127 x P 149 x H 54 mm • Poids : 61 g
 • Poids : 517 g



NBX Micromoteur Électrique LED Ultracompact

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	NBX	E1059051
—	NBX N	E1074051

• Vitesse Max : 40 000 min⁻¹ • Micromoteur seulement (cordon non inclus)
 • LED incorporée (seulement pour NBX lumière)
 • Ultracompact et léger revêtement du corps en titane

Cordon Moteur NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	NBX CDB	E1059061
—	NBX N CDB	E1074061

• Cordon seul • Courant continu



M40 XS Micromoteur à charbon

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	M40 XS	E1135051
—	M40N XS	E1136051

• Silencieux pour des opérations de 60 à 40 000 min⁻¹
 • Plus court et plus léger pour un équilibre parfait
 • Corps en titane avec revêtement DURACOAT
 • LED incorporée dans le micromoteur • Bonne ergonomie
 • Connexion facile aux cordons Bien Air® 4VLM et 4VR 400

Cordon Moteur NSK

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	M40-CD	S900100



Micromoteur Pneumatique

Ti-Max X205L

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	X205L	M1013

• Vitesse Max : 23 000 min⁻¹ ±10% • Rotation à 360° avec lumière LED
 • 32 000 LUX • Corps en titane avec revêtement DURACOAT
 • Valve Anti-retour



DynaLED M205LG

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	M205LG M4	M1018
●	M205LG B2	M1019

• Vitesse Max : 22 000 min⁻¹ ±10% (M4),
 Vitesse Max : 25 000 min⁻¹ ±10% (B2)
 • Midwest 4 voies / Borden 2 voies • 25 000 LUX
 • Moteur pneumatique à LED avec micro générateur électrique
 • Valve Anti-retour




S-Max M205

Spray Interne

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	M205	M1007

• Vitesse Max : 22 000 min⁻¹ ±10% • Midwest 4 voies
 • Corps en Acier Inoxydable • Valve Anti-retour

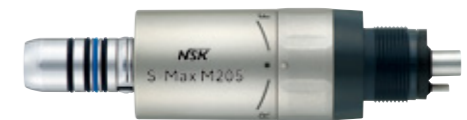

FX205m

Spray Externe

Lumière	MODÈLE	RÉF
—	FX205m M4	M1005001
—	FX205m B2	M1006001

• Vitesse Max : 22 000 min⁻¹ ±10% (M4),
 Vitesse Max : 25 000 min⁻¹ ±10% (B2)
 • Midwest 4 voies / Borden 2 voies • Corps en Acier Inoxydable



Détartreur Ultrasonique

Varios 970

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	VA970 LUX 230V S1	Y1004161
—	VA970 230V S1	Y1004160

- Contenu**
- Boîtier de contrôle
 - Pièce à main
 - Cordon de pièce à main
 - 3 inserts de détartrage (G4, G8, G16)
 - Pédale de contrôle (FC-70)
 - 2 flacons d'irrigation
 - 3 clés dynamométriques avec limiteur de couple
 - Cordon d'alimentation CA
 - Cassette de stérilisation



Détartreur Pneumatique

Ti-Max S970

Lumière	MODÈLE	RÉF
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

- Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures
- Barreau de Quartz
- Anneau de puissance 3 niveaux
- Inclus 3 inserts (S1, S2 & S3), Clé dynamométrique pour insert (CR-20) et couvercle pour insert (L)



Restauration Intervention Minimale

MODÈLE	RÉF
G61D	Z217601

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
G62D	Z217602

- Diamanté

MODEL	ORDER CODE
G65D	Z217605

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
G66D	Z217606

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
G67D	Z217607

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
G68D	Z217608

- Diamanté

Condensation

MODÈLE	RÉF
G21	Z217010

- Sans irrigation • Pour les dents antérieures
- 3 capuchons fournis

MODÈLE	RÉF
G22	Z217020

- Sans irrigation • Pour les dents postérieures
- 3 capuchons fournis

Descellement / Obturation

MODÈLE	RÉF
G26	Z217206

- Post-descellement

MODÈLE	RÉF
G28	Z217208

- Sans irrigation
- Condensation amalgame

Système V-TIP

MODÈLE	RÉF
V30	Z217030

- Comprend une clé de remplacement de l'insert E
- Support V-Tip • Insert en option

Restauration (V-TIP) l'élimination des caries

MODÈLE	RÉF
V-S1	Y900161

- acier inoxydable • Vendus par 3

MODÈLE	RÉF
V-S3	Y900162

- acier inoxydable • Vendus par 3

MODÈLE	RÉF
V-S33	Y900163

- acier inoxydable • Vendus par 3

Restauration Intervention Minimale

MODÈLE	RÉF
S65D	Z252465

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S66D	Z252466

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S67D	Z252467

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S68D	Z252468

- Diamanté

Restauration Intervention Coronaire

MODÈLE	RÉF
S81D	Z252469

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S82D	Z252462

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S83D	Z252461

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S86D	Z252460

- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S71D	Z252471


- Diamanté

MODÈLE	RÉF
S72D	Z252472




- Diamanté

Pièces Détachées



Ti-Max Z



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX3-NU03 Rotor pour tête micro		PA2307X001
TiZ-MU03 Rotor pour tête mini		Y1002075
TiZ-SU03 Rotor pour tête standard		Y1002076
Jeu de joints (Vendue par 5)		Y900580



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-NU04 Couvercle pour tête micro		PA2307X050
TiZ-MU04 Couvercle pour tête mini		P1051050
TiZ-SU04 Couvercle pour tête standard		P1052050
SX-NU05 Clé de couvercle pour tête micro		PA2307X765

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
TiZ-MU05 Clé de couvercle pour tête mini		Z265006
TiZ-SU05 Clé de couvercle pour tête standard		Z265007
Fil de nettoyage		Z144101



S-Max M


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-MU03 Rotor pour tête mini		P1280
SX-SU03 Rotor pour tête standard		P1281


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Jeu de joints (Vendue par 5)		Y900580
SX-MU04 Couvercle pour tête mini		P1001500

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-SU04 Couvercle pour tête standard		P1027500
SX-SU05 Clé de couvercle pour tête mini & tête standard		20000535



S-Max pico


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-PU03 Rotor pour S-Max pico		P1140200
Jeu de joints (Vendue par 5)		Y900580


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-PU04 Couvercle pour S-Max pico		P1140500

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-PU05 Couvercle pour S-Max pico		20002803



Ti-Max X450



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
TiX45-SU03 Rotor pour tête standard		Y1001906
Jeu de joints (Vendue par 5)		Y900580


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
TiX45-SU04 Couvercle pour tête standard		P1078500

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Clé de couvercle pour X450		P624765

Pana-Max PLUS


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-MU03 Rotor pour tête mini		P1280
SX-SU03 Rotor pour tête standard		P1281


MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-MU04 Couvercle pour tête mini		P1001500
SX-SU04 Couvercle pour tête standard		P1027500

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
SX-SU05 Clé de couvercle pour tête mini & tête standard		20000535



Pana-Max2



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
PAX2-SU03 Rotor		P1190



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
PAX2-SU04 Couvercle		P1190050

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
PAX2-SU05		P1190765



Raccords

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Valve non-rétractable		P401054
Ampoule LED Pour PTL/KCL/SCL		10000198



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Ampoule PTL Halogène Pour PTL (Vendue par 3)		Y900529
Ampoule TA Halogène Pour KCL-6 (Vendue par 3)		Y900132

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Jeu de joint Pour KCL-6/LED		Y900211
Jeu de joint Pour SCL-LED		S900060



Série FX



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
FX25-04 Couvercle pour FX25m		C1052500
FX25-03 Rotor pour FX25m		C1052700



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
FX Bague de spray Pour FX25m/FX15m		C1052702
Bague de spray Pour FX65m		H019711



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Clé FX Pour FX25m		C1052701
Tube		Z166101



Série EX



MODÈLE	PRODUITS	RÉF
FPB-03 Rotor pour FPB		C875060
NAC-03 Rotor pour NAC		C030011

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
FFB-03 Rotor pour FFB		C884060
Bague de spray Pour NAC, BB, FPB, FFB, TEP		C032701

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
NAC-02 Pièce de transmission		C032012
Clé couvercle Pour AR-Y (S)		C185751

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
BB-03 Rotor pour BB		C037015
NBB-03 Rotor pour NBBW		C210015

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Bague de spray Pour EX-5B, EX-6B		H019711
FPB-02 Pièce de transmission		C875012

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Clé couvercle (Noir)		C071751
Tube		Z166101

Ti-Max X95EX

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Tube		Z166101

Kavo et Multiflex sont des marques déposées de KaVo Dental GmbH.
Dentsply Sirona et Sirona sont des marques déposées de la société Dentsply Sirona Inc.
W&H et Roto Quick sont des marques déposées de la société W&H Deutschland GmbH.
Bien Air et UNIFIX sont des marques déposées de Bien-Air Holding SA.

Satelec est une marque déposée de Satelec, une société du groupe Acteon.
EMS est une marque déposée de Ferton Holding SA.